




Tri Auto mini

Le nouveau moteur d'endodontie compact

Aperçu des avantages apportés par le Tri Auto mini

- Nouvelles fonctions innovantes
- Fonctionnement sur batterie e sans fil
- Gamme de vitesses souple de 50 à 1 000 tr/min
- 6 mémoires pour les paramètres de traitement
- Système modulaire et extensible avec Root ZX mini
- Adapté à toutes les limes NiTi courantes

Thinking ahead. Focused on life.

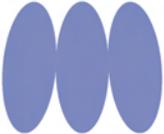

MORITA

Tri Auto mini – Des fonctions convaincantes

Outre sa grande puissance, le moteur d'endodontie Tri Auto mini se distingue par son extrême grande souplesse. De dimensions compactes et de poids réduit, il tient parfaitement dans le creux de la main. Fonctionnant sur batterie rechargeable, il offre une liberté de mouvement inédite aux médecins pendant une intervention.

Par une simple pression de touche, l'utilisateur peut ajuster la vitesse de la lime, les valeurs de couple et diverses fonctions de sécurité et accroît de la sorte la sécurité du patient.

Pour simplifier encore davantage la manipulation, les paramètres individuels pour différentes indications thérapeutiques peuvent être mémorisés.

Couplé au localisateur d'apex Root ZX mini, il se transforme en un appareil d'endodontie et d'intervention de première classe.



Souplesse

- Tri Auto mini est adapté à une utilisation avec toutes les limes NiTi courantes
- Pièce à main pivotante (250°) pour une vue optimale dans tous les quadrants dentaires
- Gamme de vitesses de 50 à 1 000 tours par minute
- Pour gauchers et droitiers
- Fonctionnement sur batterie et sans fil

Confort d'utilisation

- Contre-angle de préhension agréable avec une tête extrêmement petite (9 mm) pour accroître le confort du patient
- Écran couleur à cristaux liquides d'ordonnancement clair et économe en énergie
- Signaux acoustiques sélectionnables
- Vitesse de lime variable
- Valeur de couple variable
- 6 mémoires pour les paramètres de traitement



Couleur de l'écran à cristaux liquides au choix



Inversion de l'affichage pour les gauchers

Sécurité

- Fonctions innovantes
 - Auto Torque Reverse
 - Auto Torque Slow Down : réduction de la vitesse de rotation à proximité du couple limite
- Affichage de la position de la lime sur l'écran*
- Changement de couleur de l'écran à proximité de l'apex*

Système modulaire

- Extension avec le localisateur d'apex Root ZX mini via un câble de transfert des données
- Fonctions supplémentaires pour une préparation optimale
 - Mesure de la longueur
 - Auto Apical Stop
 - Auto Apical Reverse
 - Auto Start / Stop
 - Auto Apical Slow Down

*) En combinaison avec Root ZX mini



Caractéristiques techniques du Tri Auto mini

Pièce à main

Écran: cristaux liquides
Poids: 78 g
Moteur: de 50 à 1 000 tr/min
Couple: 3,9 Ncm
Accumulateur: 3,7 V Lithium-Ion
Diamètre: 28 mm, hauteur: 150 mm

Diffusé par

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a, 63128 Dietzenbach, Deutschland
Tel.: +49 (0)60 74 / 836 - 0, Fax: +49 (0)60 74 / 836 - 299
www.JMoritaEurope.com

Fabriqué par

J. Morita Mfg. Corp.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612 - 8533 Japan
Tel.: +81 (0)75 / 611 - 2141, Fax: +81 (0)75 / 622 - 4595
www.JMorita.com

